




DES PREMIERS SECOURS EFFICACES ET RAPIDES

eyeaid s'utilise d'une seule main, il est donc à la fois rapide, simple et efficace. Un seul geste suffit pour commencer le rinçage de votre œil. Son système innovant et unique d'ouverture de l'œil garantit un lavage sûr et précis. Il permet d'exposer l'œil sans aucun contact physique avec celui-ci ou son contour, éliminant le risque de contamination ultérieure par des doigts « sales ».

En cas de blessures graves, le blessé bénéficie d'un temps de rinçage prolongé et efficace, et le format pratique permet une grande mobilité pendant le transport vers l'hôpital. La station murale eyeaid est bien visible grâce à son design unique et à ses couleurs. Elle assure un accès rapide aux aérosols tout en les protégeant des salissures et de la poussière. eyeaid présente un excellent rapport qualité/prix, offrant une solution innovante et un rinçage prolongé à moindre coût.

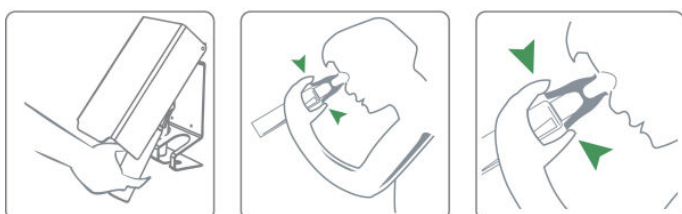

Contenu de chaque aérosol de 250 ml

Ingrédient	N° CAS	% en poids
Dihydrogénophosphate de sodium	13472-35-0	< 1
Chlorure de sodium, USP	7647-14-5	0,9
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	Ajusté à pH 7,4
Eau, USP		100
Azote, USP	7727-37-9	

eyeaid repose sur une solution d'aérosol à valve à poche stérile, garantissant à l'œil un flux constant et équilibré de solution de lavage oculaire. Chaque aérosol contient 250 ml de sérum physiologique stérile pour lavage oculaire, ce qui permet de rincer pendant au minimum 15 minutes tout produit chimique ou corps étranger dangereux présent dans l'œil.

La solution d'aérosol garantit au blessé un rinçage efficace dans toutes les positions.

Spécifications techniques – Station eyeaid :

- Support – acier 2 mm avec revêtement par poudre
- Cache avant – acrylique 2 mm (Axpert) sérigraphié
- Dimensions – 320 x 175 x 103 mm



Spécifications techniques – Aérosol :

- 250 ml de solution tampon de chlorure de sodium à 0,9 %
- Aérosol azoté
- Pression – 4,5 bars
- Matière plastique : HD810140 de Borealis
- Poids net 315 g
- Durabilité 3 années

LES PRODUITS DE LAVAGE OCULAIRE EYEAID SONT BIEN ENTENDU LABELLISÉS CE, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU MATÉRIEL MÉDICAL, ET ILS SONT STÉRILES, POUR ÉVITER TOUTE CONTAMINATION ULTÉRIEURE DE L'ŒIL PENDANT LE RINÇAGE.

Réf.	Description
300777	Aérosol pour lavage oculaire eyeaid de 250 ml
300779	Recharge pour lavage oculaire eyeaid avec 2 aérosols de 250 ml
300780	Station eyeaid avec 2 aérosols de 250 ml
300781	Station eyeaid