




### SCHNELLE HILFE ZUR SELBSTHILFE

eyeaid ist der einzige Augenspüler auf dem Markt, der tatsächlich mit einer Hand bedient werden kann. Der innovative, patentierte mechanische Augenöffner hält das geschädigte Auge zuverlässig offen, ohne dass es physisch mit „unsauberen Fingern“ berührt wird. So kommen keine schädlichen Flüssigkeiten und Stoffe von unsauberen Händen und Fingern zum geschädigten Auge und das Risiko von Folgeschäden wird minimiert.

Der eyeaid Augenspüler basiert auf einer sterilen Bag-in-Valve-Spraylösung, die sicherstellt, dass dem Auge konstant und dauerhaft ohne unnötige Unterbrechungen die korrekte Menge Spüllösung zugeführt wird. Der Inhalt von 250 ml einer eyeaid Augenspülung reicht für eine konstante Spülung von bis zu 15 Minuten oder 3-5 Mal so lange wie mit anderen konventionellen Lösungen. Da die Sprayflasche unter Druck steht, kann das geschädigte Auge der verletzten Person unabhängig von der Position der Person gespült werden.

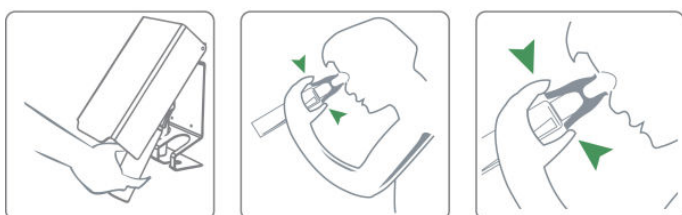

### Inhalt in der Flasche

Inhaltsstoffe	CAS Nr.	Gewicht in %
Natriumhydrogenphosphat	13472-35-0	<1
Natriumchlorid, USP	7647-14-5	0,9
Natriumhydroxid	1310-73-2	Eingestellt auf pH7,4
Wasser, USP		100
Nitrogen, USP	7727-37-9	

### Technische Spezifikationen - Flasche:

- 250 ml 0,9 % gepufferte Natriumchloridlösung
- Treibgas – Stickstoff
- Druck – 4,5 Bar
- Kunststoff: Borealis HD810140
- Gewicht netto: 315 g
- Haltbarkeit 3 Jahre



### Technische Spezifikationen - Augenspülstation:

- Halter – 2 mm Stahl, pulverlackiert
- Abdeckung – Axpert (Acryl) 2mm mit Seidenglanz-Effekt
- Abmessungen – 320 x 175 x 103 mm

eyeaid ist gemäß MDD 93/42 EEC Klasse 2A als steriles medizintechnisches Produkt klassifiziert und gemäß EU 0413 zugelassen. Zum Patent angemeldet.

Artikelnr.	Beschreibung
300777	eyeaid Augenspülung 250 ml. – Phosphatgepuffert Isotron pH 7,4
300779	eyeaid Augensäulung 250 ml. - Box Nachfüllung 2 x 250 ml.
300780	eyeaid Augenspülstation inkl. 2 x 250 ml. EYE AID Augenspülung
300781	eyeaid Augenspülstation

Weitere Informationen finden Sie unter [www.eyeaid.dk](http://www.eyeaid.dk)