




## SNABB OCH EFFEKTIV FÖRSTA HJÄLPEN

eyeaid används med en hand och är därför både snabb, enkel och effektiv att använda. Det behövs bara en rörelse för att börja skölja ditt öga. Den innovativa och unika ögonöppnaren garanterar en säker och exakt sköljning av ögat. Ögonöppnaren gör det möjligt att öppna ögat utan fysisk kontakt med ögat eller dess omgivning. Detta eliminerar risken för ytterligare kontaminering från "smutsiga" fingrar.

Vid allvarliga skador garanterar den långa och effektiva sköljningstiden stor rörlighet för den skadade personen under transporten till sjukhuset. eyeaid väggstation är mycket lätt att upptäcka tack vare sin unika design och valet av färger. Stationen säkerställer snabb åtkomst till sprayflaskorna och skyddar dem från smuts och damm. eyeaid ger dig mycket värde för pengarna genom en innovativ lösning och lång sköljningstid till en lägre kostnad.

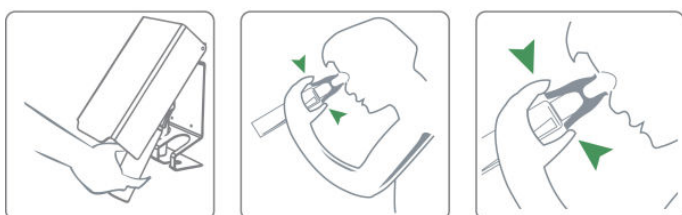

### Innehåll i varje 250 ml flaska

Ingrediens	CAS-nr	Vikt i %
Natriumdivätefosfat	13472-35-0	<1
Natriumklorid, USP	7647-14-5	0,9
Natriumhydroxid	1310-73-2	Justerad till pH 7,4
Vatten, USP		100
Kvävgas, USP	7727-37-9	

eyeaid är baserad på en steril Bag-in-Valve sprayflaska som säkerställer att ögat får ett balanserat och konstant flöde av lösningen för ögonsköljning. Varje sprayflaska innehåller 250 ml steril saltlösning för ögonsköljning vilket ger minst 15 minuters sköljning om ögat utsatts för någon farlig kemikalie eller något främmande föremål.

Aerosollösningen garanterar att den skadade personen har möjlighet till sköljning oberoende av den skadade personens fysiska position.

### Teknisk specifikation – eyeaid-station:

- Hållare – 2 mm stål med pulverbeläggning
- Främre lock – 2 mm akryl (axpet) med tryck
- Dimensioner – 320 X 175 X 103 mm



### Teknisk specifikation – sprayflaska:

- 250 ml 0,9 % buffrad natriumklorid
- Kvävgasbaserad aerosolflaska
- Tryck – 4,5 bar
- Plastmaterial: Borealis HD810140
- Nettovikt 315 g
- Hållbarhet 3 år

EYE Aid ÖGONTVÄTTPRODUKTER ÄR NATURLIGTVIS CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED REGLERNA FÖR MEDICINSK UTRUSTNING OCH DE ÄR STERILA, SÅ ATT ÖGAT INTE KONTAMINERAS YTTRELLIGARE UNDER SKÖLJNINGEN.

Artikelnr	Beskrivning
300777	eyeaid ögontvätt 250 ml sprayflaska
300779	eyeaid ögontvätt påfyllningsask med 2 X 250 ml sprayflaskor
300780	eyeaid station inkl. 2 X 250 ml sprayflaskor
300781	eyeaid station

Ytterligare information finns på [www.eyeaid.dk](http://www.eyeaid.dk)